

DOUBLE HANDLES DIODE LASER HAIR REMOVAL - DIOLASHEER ICE1600



PUNHO DE TELA DE TOQUE

MÚLTIPLAS COMBINAÇÕES DE ENERGIA



12*12mm
600W 1200W



12*20mm
1200W



12*24mm
1600W 2000W



12*28mm
2000W



ESPECIFICAÇÃO

Poder	3000W
Poder do punho	600-2000W optional
Comprimento de onda	808nm (755nm+808nm+1064nm optional)
Tela da máquina	12.1 inch
Manipular tela	1.54 inch
Densidade de energia	1-120J/cm2 (Deviation $\leq \pm 2\%$)
Faixa de largura de pulso	1-200ms
Tamanho do ponto	12*12mm ; 12*20mm; 12*24mm; 12*28mm
Frequência	1-10HZ (600-1200w) 1-20HZ (1600-2000w)
Sistema de refrigeração	Sistema de refrigeração TEC
Tensão	AC220V $\pm 10\%$ 10A 50HZ , 110v $\pm 10\%$ 10A 60HZ

VANTAGENS



Eficaz

Saída de alta potência de 2000 w, o resultado do tratamento é garantido

Estábulo

Barra de laser americana, garantia de 100 milhões de tiros


Fácil de operar

Software de operação inteligente, parâmetros de tratamento predefinidos para todos os tipos de pele

Sistema de refrigeração forte

O sistema de refrigeração TEC não só garante o conforto do tratamento, mas também garante o funcionamento contínuo da máquina a longo prazo

PRINCÍPIO DE TRATAMENTO

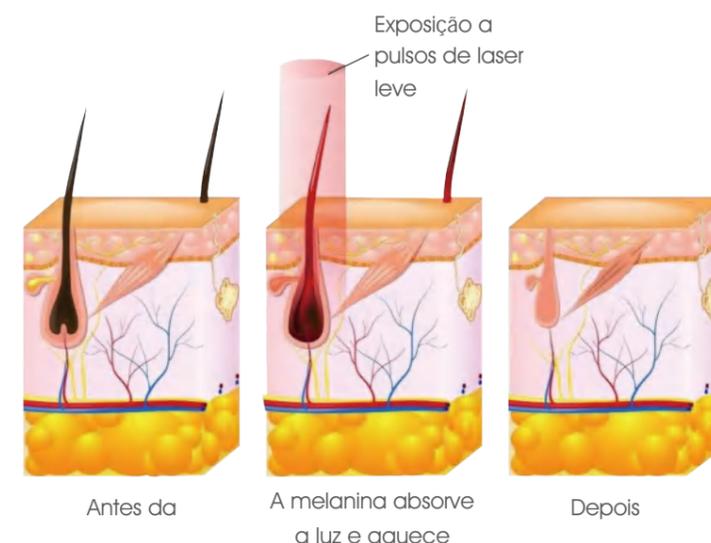

A máquina de depilação a laser de diodo é agora a máquina de depilação mais avançada e eficaz do mercado. Ao ajustar adequadamente o comprimento da onda do laser e a largura do pulso, o laser pode penetrar na camada superior da pele e atingir o folículo piloso. Então a energia da luz será absorvida e convertida em energia térmica que pode destruir o folículo piloso. Assim, o laser fará com que o cabelo perca sua capacidade de se regenerar sem destruir o tecido circundante. Portanto, a máquina de depilação a laser de diodo é uma tecnologia indolor que pode remover vários pêlos do corpo com segurança, rapidez e por muito tempo.

ANTES DEPOIS



DIODE LASER HAIR REMOVAL

- DIOLASHEER ICE 2000

PUNHO DE TELA DE TOQUE

MÚLTIPLAS COMBINAÇÕES DE ENERGIA




12*12mm
600W 1200W



12*20mm
1200W



12*24mm
1600W 2000W

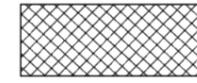


12*28mm
2000W



ESPECIFICAÇÃO

Poder	3000W
Poder do punho	600-2000W optional
Comprimento de onda	808nm (755nm+808nm+1064nm optional)
Tela da máquina	12.1 inch
Manipular tela	1.54 inch
Densidade de energia	1-120J/cm2 (Deviation ≤ ±2%)
Faixa de largura de pulso	1-200ms
Tamanho do ponto	12*12mm ; 12*20mm; 12*24mm; 12*28mm
Frequência	1-10HZ (600-1200w) 1-20HZ (1600-2000w)
Sistema de refrigeração	Sistema de refrigeração TEC
Tensão	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ

VANTAGENS

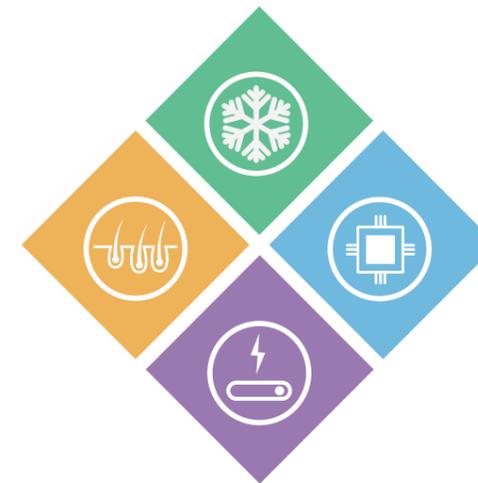

Eficaz

Saída de alta potência de 2000 w, o resultado do tratamento é garantido.

Estábulo

Barra de laser americana, garantia de 100 milhões de tiros.


Fácil de operar

Software de operação inteligente, parâmetros de tratamento predefinidos para todos os tipos de pele.

Sistema de refrigeração forte

O sistema de refrigeração TEC não só garante o conforto do tratamento, mas também garante o funcionamento contínuo da máquina a longo prazo.

PRINCÍPIO DE TRATAMENTO

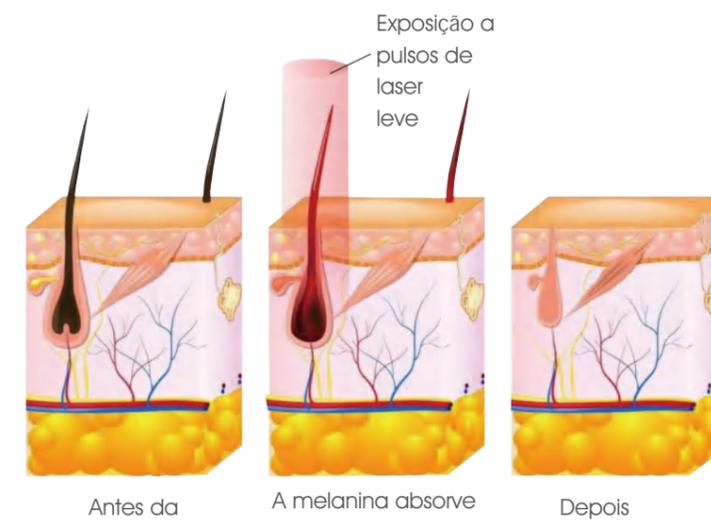

A máquina de depilação a laser de diodo é agora a máquina de depilação mais avançada e eficaz do mercado. Ao ajustar adequadamente o comprimento da onda do laser e a largura do pulso, o laser pode penetrar na camada superior da pele e atingir o folículo piloso. Então a energia da luz será absorvida e convertida em energia térmica que pode destruir o folículo piloso. Assim, o laser fará com que o cabelo perca sua capacidade de se regenerar sem destruir o tecido circundante. Portanto, a máquina de depilação a laser de diodo é uma tecnologia indolor que pode remover vários pêlos do corpo com segurança, rapidez e por muito tempo.

ANTES DEPOIS



DOUBLE HANDLES DIODE LASER HAIR REMOVAL - FOCUS 1200

PUNHO DE TELA DE TOQUE

MÚLTIPLAS COMBINAÇÕES DE ENERGIA



ESPECIFICAÇÃO

Poder	3000W
Poder do punho	600-2000W optional
Comprimento de onda	808nm (755nm+808nm+1064nm optional)
Tela da máquina	12.1 inch
Manipular tela	1.54 inch
Densidade de energia	1-120J/cm ² (Deviation≤±2%)
Faixa de largura de pulso	1-200ms
Tamanho do ponto	12*12mm ; 12*20mm; 12*24mm; 12*28mm
Frequência	1-10HZ (600-1200w) 1-20HZ (1600-2000w)
Sistema de refrigeração	Sistema de refrigeração TEC
Tensão	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ

VANTAGENS



Eficaz

Sai da de alta potência de 2000 w, o resultado do tratamento é garantido.

Estábulo

Barra de laser americana, garantia de 100 milhões de tiros


Fácil de operar

Software de operação inteligente, parâmetros de tratamento predefinidos para todos os tipos de pele

Sistema de refrigeração forte

O sistema de refrigeração TEC não só garante o conforto do tratamento, mas também garante o funcionamento contínuo da máquina a longo prazo

PRINCÍPIO DE

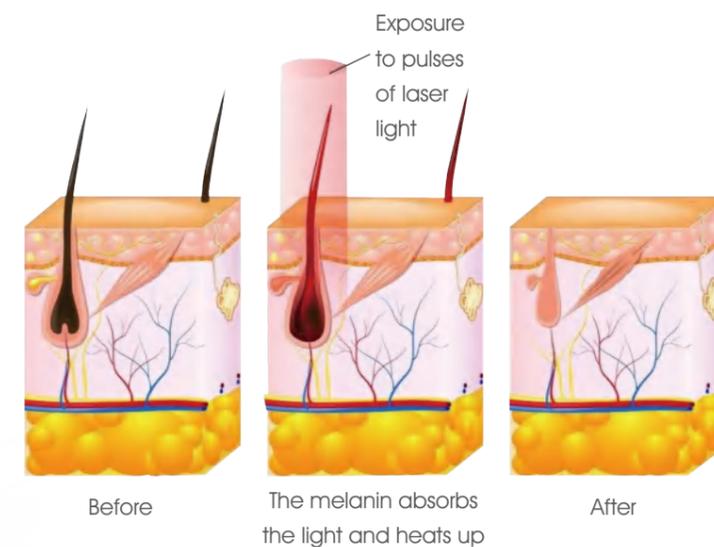

Diode Laser Hair Removal Machine is now the most advanced and effective hair removal machine on the market. By properly adjusting laser wave length and pulse width, the laser can penetrate the top layer of skin and then reach the hair follicle. Then the light energy will be adsorbed and converted into thermal energy which can destroy the hair follicle. Thus the laser will make the hair lose its ability to regenerate while not destroying surrounding tissue. So the Diode Laser Hair Removal Machine is a painless technology which can remove various body hair safely, quickly and for long.

BEFORE & AFTER



DIODE LASER HAIR REMOVAL

- DL1000-B



PUNHO DE TELA DE TOQUE

MÚLTIPLAS COMBINAÇÕES DE ENERGIA



12*12mm
600W 1200W




12*20mm
1200W



ESPECIFICAÇÃO

Tipo de laser	Laser semiconductor
Poder	2500w
Poder do punho	600-1200w
Comprimento de onda	808nm (755nm+808nm+1064nm optional)
Tamanho da tela	10.4Inch
Densidade de energia	1-120J/cm ² (Deviation ±2%)
Faixa de largura de pulso	1-200ms
Tamanho do ponto	12*20mm; 12*12mm
Frequência	1-10HZ
Sistema de refrigeração	Sistema de refrigeração TEC
Tensão	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ

VANTAGENS

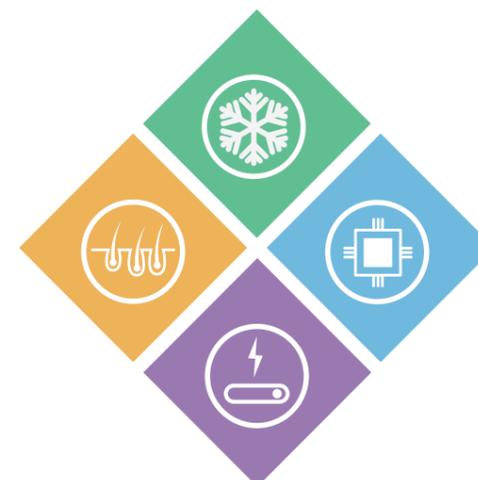

Eficaz

Saída de alta potência de 1200 w, o resultado do tratamento é garantido.

Estável

Barra de laser americana, garantia de 100 milhões de tiros.


Fácil de operar

Software de operação inteligente, parâmetros de tratamento predefinidos para todos os tipos de pele.

Sistema de refrigeração forte


O sistema de refrigeração TEC não só garante o conforto do tratamento, mas também garante o funcionamento contínuo da máquina a longo prazo.

PRINCÍPIO DE TRATAMENTO

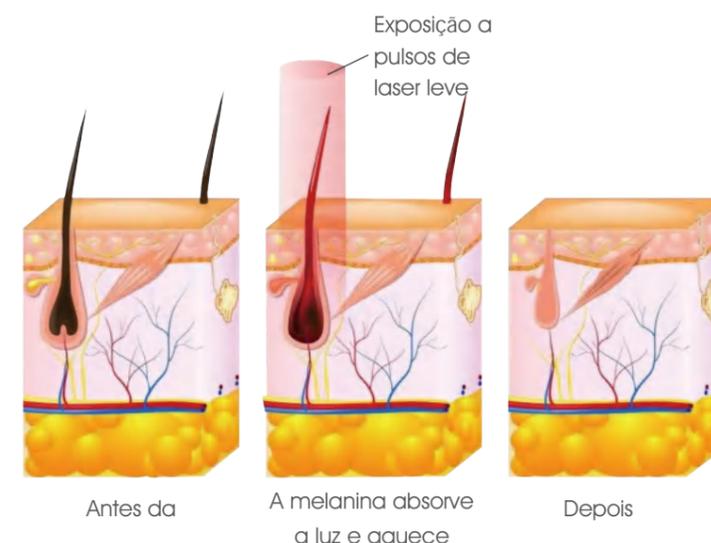

A máquina de depilação a laser de diodo é agora a máquina de depilação mais avançada e eficaz do mercado. Ao ajustar adequadamente o comprimento da onda do laser e a largura do pulso, o laser pode penetrar na camada superior da pele e atingir o folículo piloso. Então a energia da luz será absorvida e convertida em energia térmica que pode destruir o folículo piloso. Assim, o laser fará com que o cabelo perca sua capacidade de se regenerar sem destruir o tecido circundante. Portanto, a máquina de depilação a laser de diodo é uma tecnologia indolor que pode remover vários pelos do corpo com segurança, rapidez e por muito tempo.

ANTES DEPOIS

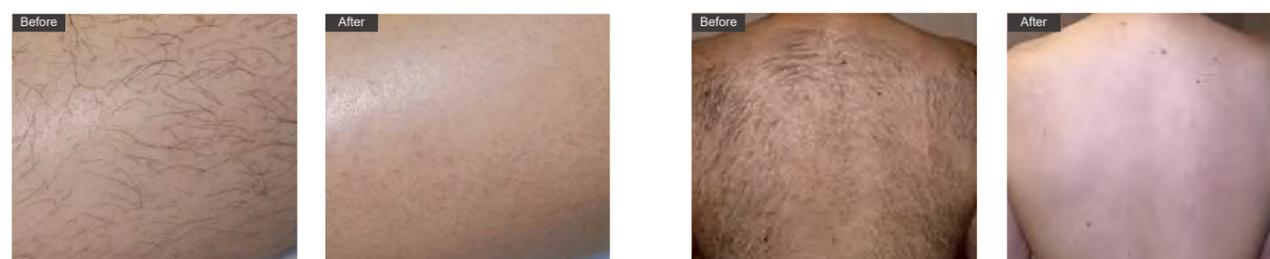

DIODE LASER HAIR REMOVAL

- DL 1200 MINI-D

PUNHO DE TELA DE TOQUE

MÚLTIPLAS COMBINAÇÕES DE ENERGIA



12*12mm
600W 1200W



12*20mm
1200W



ESPECIFICAÇÃO

Tipo de laser	Laser semiconductor
Poder	2500w
Poder do punho	600-1200w
Comprimento de onda	808nm (755nm+808nm+1064nm optional)
Tamanho da tela	12.1 Inch
Densidade de energia	1-120J/cm2 (Deviation ±2%)
Faixa de largura de pulso	1-200ms
Tamanho do ponto	12*20mm; 12*12mm
Frequência	1-10HZ
Sistema de refrigeração	Sistema de refrigeração TEC
Tensão	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ

VANTAGENS



Eficaz

Saída de alta potência de 1200 w, o resultado do tratamento é garantido.

Estábulo

Barra de laser americana, garantia de 100 milhões de tiros.


Fácil de operar

Software de operação inteligente, parâmetros de tratamento predefinidos para todos os tipos de pele.

Sistema de refrigeração forte

O sistema de refrigeração TEC não só garante o conforto do tratamento, mas também garante o funcionamento contínuo da máquina a longo prazo.

PRINCÍPIO DE TRATAMENTO

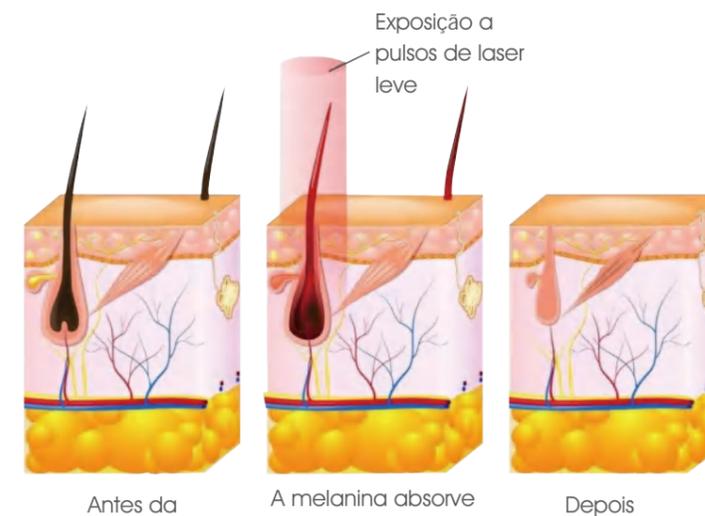

A máquina de depilação a laser de diodo é agora a máquina de depilação mais avançada e eficaz do mercado. Ao ajustar adequadamente o comprimento da onda do laser e a largura do pulso, o laser pode penetrar na camada superior da pele e atingir o folículo piloso. Então a energia da luz será absorvida e convertida em energia térmica que pode destruir o folículo piloso. Assim, o laser fará com que o cabelo perca sua capacidade de se regenerar sem destruir o tecido circundante. Portanto, a máquina de depilação a laser de diodo é uma tecnologia indolor que pode remover vários pêlos do corpo com segurança, rapidez e por muito tempo.

ANTES DEPOIS



DIODE LASER HAIR REMOVAL

- DL 1200 MINI-C

PUNHO DE TELA DE TOQUE

MÚLTIPLAS COMBINAÇÕES DE ENERGIA



12*12mm
600W 1200W

12*20mm
1200W



ESPECIFICAÇÃO

Tipo de laser	Laser semiconductor
Poder	2500w
Poder do punho	600-1200w
Comprimento de onda	808nm (755nm+808nm+1064nm optional)
Tamanho da tela	12.1 Inch
Densidade de energia	1-120J/cm2 (Deviation ±2%)
Faixa de largura de pulso	1-200ms
Tamanho do ponto	12*20mm; 12*12mm
Frequência	1-10HZ
Sistema de refrigeração	Sistema de refrigeração TEC
Tensão	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ

VANTAGENS



Eficaz

Saída de alta potência de 1200 w, o resultado do tratamento é garantido.

Estábulo

Barra de laser americana, garantia de 100 milhões de tiros.


Fácil de operar

Software de operação inteligente, parâmetros de tratamento predefinidos para todos os tipos de pele.

Sistema de refrigeração forte


O sistema de refrigeração TEC não só garante o conforto do tratamento, mas também garante o funcionamento contínuo da máquina a longo prazo.

PRINCÍPIO DE TRATAMENTO

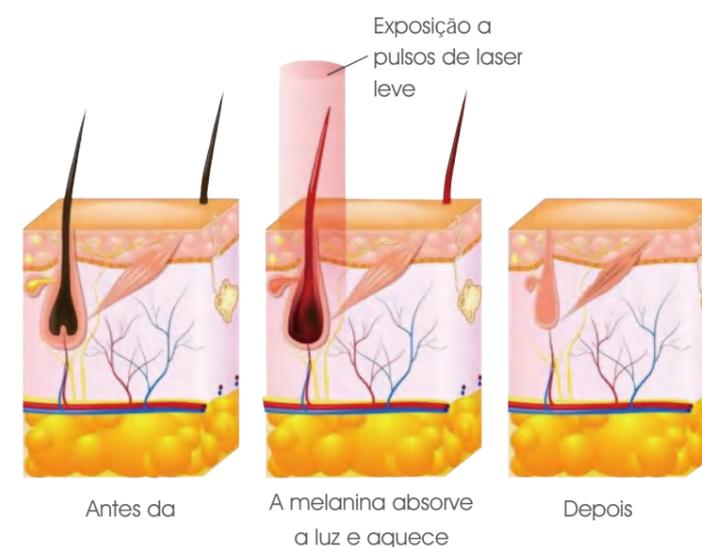


A máquina de depilação a laser de diodo é agora a máquina de depilação mais avançada e eficaz do mercado. Ao ajustar adequadamente o comprimento da onda do laser e a largura do pulso, o laser pode penetrar na camada superior da pele e atingir o folículo piloso. Então a energia da luz será absorvida e convertida em energia térmica que pode destruir o folículo piloso. Assim, o laser fará com que o cabelo perca sua capacidade de se regenerar sem destruir o tecido circundante. Portanto, a máquina de depilação a laser de diodo é uma tecnologia indolor que pode remover vários pelos do corpo com segurança, rapidez e por muito tempo.

ANTES DEPOIS

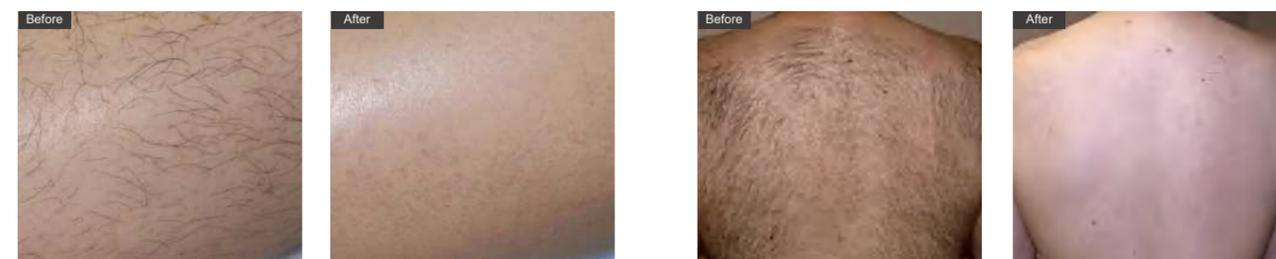


CRYOLIPOLYSIS SLIMMING MACHINE - CRYOTEC 360 Pro

O procedimento de criolipólise oferece resfriamento controlado com precisão para atingir de forma suave e eficaz as células de gordura sob a pele. As células de gordura tratadas são cristalizadas (congeladas) e depois morrem. Com o tempo seu corpo processa naturalmente a gordura e elimina essas células mortas, deixando você mais esculpido.

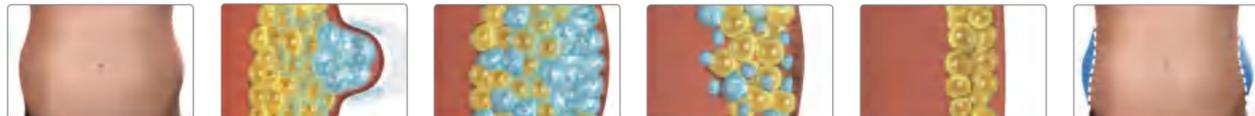

Cryotec360 VS Tecnologia antiga

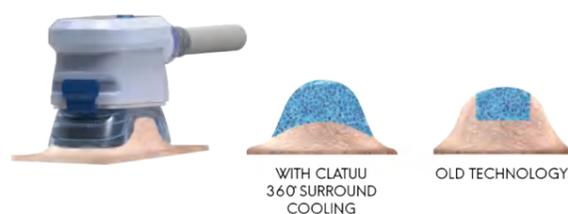

REVOLUCIONÁRIO CONTORNOS



MUDE OS CONTORNOS COM FACILIDADE
os contornos são fixados com segurança ao aplicador alteram rapidamente os contornos para o seu próximo tratamento

ESPECIFICAÇÃO

Número do Identificador	4 Alças Disponíveis
Manipular tela	tela sensível ao toque de 3,5 polegadas
Vácuo	OKPA-100KPA
Tela	12,1 polegadas
Temperatura de resfriamento	5 - -10°C
Sistema de refrigeração	Resfriamento a vento + resfriamento a água + resfriamento de semicondutores
Potência de entrada	2500W
Tensão	AC220V±10%,10A,50HZ AC110V±10%10A,60HZ

TAMANHOS DE 12 TAMANHOS



Copos com alça de 12 tamanhos diferentes, perfeitos para tratamento de congelamento de gordura corporal

Handle A 4 cups



Handle B 4 cups



Handle C 3 cups



Handle D

83*30*50mm




ANTES DEPOIS



CRIOLIPÓLISE EMAGRECIMENTO

MÁQUINA-CRYOTEC 360 MULTI PRO

Combinando as tecnologias de Criolipólise, Cavitação e RF 3; com 5 alças de tratamento para tratamento de corpo inteiro, redução de gordura, modelagem corporal e lifting facial.

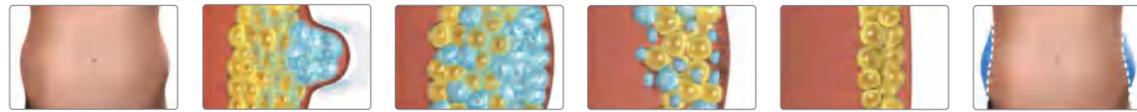

PARÂMETRO TÉCNICO	
Poder	1800W
Vácuo	0-100kpa
Energia RF	1-50J/cm2
Energia de cavitação	1-70J/cm2
Tela de peça de mão	3.5Inch
Frequência RF	2MHz
Frequência de cavitação	40KHz
Alça de tratamento	5unidades (Opcional)
Tamanho da tela de toque	12,1 Polegadas
Temperatura da cabeça congelada	-10C-5C
Sistema de resfriamento	Resfriamento semiconductor + resfriamento de água + resfriamento de ar
Voltagem	AC220V+10%, 50HZ AC110V+10%, 60HZ

VANTAGENS



Multifuncional

Combinando tecnologias de Criolipólise, Cavitação e RF 3 em uma; com 5 alças de tratamento para tratamento de corpo inteiro.

Sistema de refrigeração

Sistema de refrigeração super forte com tanque de água de 8L, radiador de cobre e ventiladores de refrigeração DC garantem 12 horas de trabalho contínuo da máquina.

Inteligente

Sistema de operação inteligente com modo automático e modo manual dois métodos de controle.

Confortável

Três minutos de aquecimento primeiro fazem uma melhor circulação sanguínea da área tratada para obter os melhores resultados de tratamento e sensação de conforto.

ESCOPO DO TRATAMENTO

01



Alça A
Para Abdômen, Flanco e Alças de Amor

02



Alça B
Para Flanco, alças de amor, costas e coxas

03



Alça C
Para braço e coxas

04



Cavi perna a

05



RF ha sem dorso




06



RF ha tratar



ANTES DEPOIS

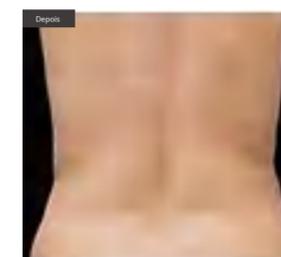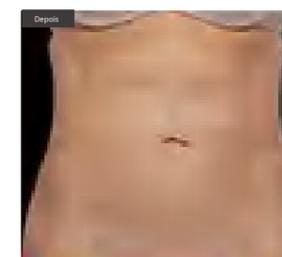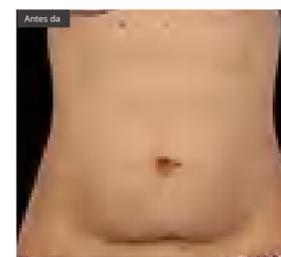

MÁQUINA DE EDIFICAÇÃO DE MÚSCULOS E QUEIMA DE GORDURA-EMS IV

Usando a tecnologia Eletromagnética Focada em Alta Intensidade (HIFEM), o Emsculpting Pro induz contrações musculares supramáximas não alcançáveis por meio de exercícios (ou contrações voluntárias). Durante as contrações musculares voluntárias normais, as fibras musculares relaxam entre cada estímulo nervoso. O Emsculpting Pro gera impulsos com uma frequência tão rápida que não permite uma fase de relaxamento tão grande. As contrações supramáximas causam uma maior liberação de adrenalina, o que desencadeia uma resposta de lipólise intensiva nas células adiposas. Quando exposto às contrações supramáximas, o tecido muscular é forçado a se adaptar, respondendo com uma profunda remodelação de sua estrutura interna que resulta em construção muscular e queima de gordura.



ESCOPO DO TRATAMENTO



Construção muscular e redução de gordura

Depois de completar um curso de tratamento, a fina magnética pode efetivamente aumentar o músculo em 16% e reduzir a gordura em 19% ao mesmo tempo

Crie uma forma de corpo perfeita

Exercite os músculos abdominais, exercite os músculos das nádegas para criar as nádegas de pêsego, exercite os músculos oblíquos abdominais para moldar a linha V do abdômen

Restaurar a figura pós-parto

Para mães que aumentaram a circunferência da barriga e barriga solta devido à separação do reto abdominal após o parto para restaurar um corpo de menina


Construir um corpo jovem

Exercício para fortalecer os músculos do núcleo, os músculos do núcleo podem proteger a coluna, manter a estabilidade do tronco, manter a postura correta, melhorar a capacidade atlética e reduzir a chance de lesões, fornecer suporte estrutural a todo o corpo e criar um corpo jovem

PARA O ABDÔMEN



PARA A nádega

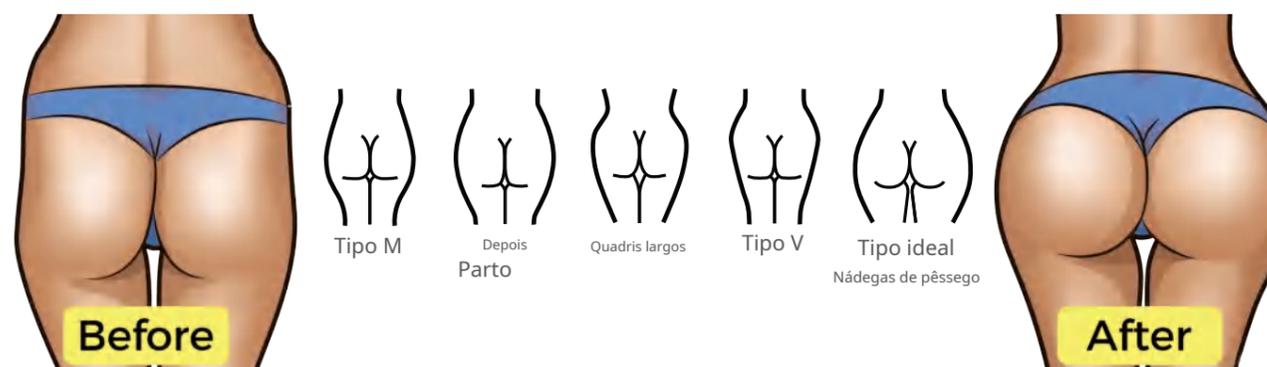

MÁQUINA DE EDIFICAÇÃO DE MÚSCULOS E QUEIMA DE GORDURA-CL9

Usando a tecnologia Eletromagnética Focada em Alta Intensidade (HIFEM), o Emsculpting Pro induz contrações musculares supramáximas não alcançáveis por meio de exercícios (ou contrações voluntárias). Durante as contrações musculares voluntárias normais, as fibras musculares relaxam entre cada estímulo nervoso. O Emsculpting Pro gera impulsos com uma frequência tão rápida que não permite uma fase de relaxamento tão grande. As contrações supramáximas causam uma maior liberação de adrenalina, o que desencadeia uma resposta de lipólise intensiva nas células adiposas. Quando exposto às contrações supramáximas, o tecido muscular é forçado a se adaptar, respondendo com uma profunda remodelação de sua estrutura interna que resulta em construção muscular e queima de gordura.

Quatro Alças Funcionam Simultaneamente

Punho Normal *2



Punho Curvo *2



ESPECIFICAÇÃO

Frequência:	1-150hz
Poder:	5000w
Intensidade:	7Tesla
Tela:	Tela resistente de 15,6 polegadas
Largura do pulso:	310µs±10%
Resfriamento:	Resfriamento a ar
Tensão:	AC220V±10% 10A 50HZ, 110v±10% 10A 60HZ

VANTAGEM



Construção muscular e redução de gordura

Depois de completar um curso de tratamento, a fina magnética pode efetivamente aumentar o músculo em 16% e reduzir a gordura em 19% ao mesmo tempo

Crie uma forma de corpo perfeita

Exercite os músculos abdominais, exercite os músculos das nádegas para criar as nádegas de pêssego, exercite os músculos oblíquos abdominais para moldar a linha V do abdômen

Restaurar a figura pós-parto

Para mães que aumentaram a circunferência da barriga e barriga solta devido à separação do reto abdominal após o parto para restaurar um corpo de menina


Construir um corpo jovem

Exercício para fortalecer os músculos do núcleo, os músculos do núcleo podem proteger a coluna, manter a estabilidade do tronco, manter a postura correta, melhorar a capacidade atlética e reduzir a chance de lesões, fornecer suporte estrutural a todo o corpo e criar um corpo jovem

PARA O ABDÔMEN



PARA A nádega

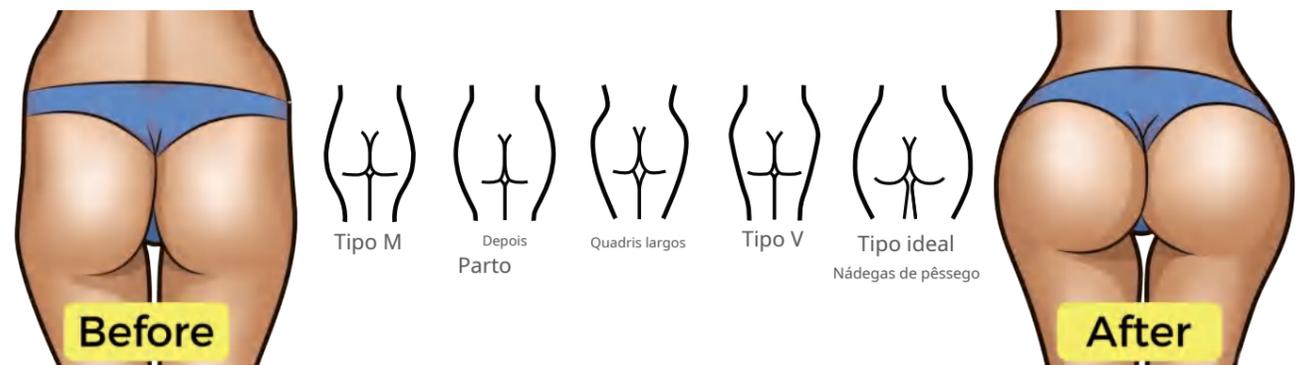

MÁQUINA DE EDIFICAÇÃO DE MÚSCULOS E QUEIMA DE GORDURA-EMS II MINI

Usando a tecnologia Eletromagnética Focada em Alta Intensidade (HIFEM), o Emsculpting Pro induz contrações musculares supramáximas não alcançáveis por meio de exercícios (ou contrações voluntárias). Durante as contrações musculares voluntárias normais, as fibras musculares relaxam entre cada estímulo nervoso. O Emsculpting Pro gera impulsos com uma frequência tão rápida que não permite uma fase de relaxamento tão grande. As contrações supramáximas causam uma maior liberação de adrenalina, o que desencadeia um processo, o tecido muscular é forçado a se adaptar, dando lugar à construção muscular e queima de gordura.



antes
Pele, gordura e músculo de sua aparência geral do corpo.

durante
A pele permanece inalterada enquanto a energia penetra para alavancas de gordura e músculo.

DEPOIS
Isso resulta em uma melhoria substancial de sua aparência devido à construção muscular e queima de gordura.



ESPECIFICAÇÃO	
Frequência:	1-150hz
Poder:	3000w
Intensidade: 1,8 Tesla	7Tesla
Tela:	Tela resistente de 12,4 polegadas
Largura do pulso:	310µs±10%
Resfriamento: Resfriamento a ar	Resfriamento a ar
Tensão:	AC220V±10% 10A 50HZ, 110v±10% 10A 60HZ

VANTAGEM



Construção muscular e redução de gordura

Depois de completar um curso de tratamento, a fina magnética pode efetivamente aumentar o músculo em 16% e reduzir a gordura em 19% ao mesmo tempo

Crie uma forma de corpo perfeita

Exercite os músculos abdominais, exercite os músculos das nádegas para criar as nádegas de pêssego, exercite os músculos oblíquos abdominais para moldar a linha V do abdômen

Restaurar a figura pós-parto

Para mães que aumentaram a circunferência da barriga e barriga solta devido à separação do reto abdominal após o parto para restaurar um corpo de menina

Construir um corpo jovem

Exercício para fortalecer os músculos do núcleo, os músculos do núcleo podem proteger a coluna, manter a estabilidade do tronco, manter a postura correta, melhorar a capacidade atlética e reduzir a chance de lesões, fornecer suporte estrutural a todo o corpo e criar um corpo jovem

PARA O ABDÔMEN




ANTES DA

Tipo H Tipo dobrável Tipo de gordura Após o parto

Construir abdominal músculos perfeitos Abdominais e V firmes linha abs

DEPOIS

PARA A nádega

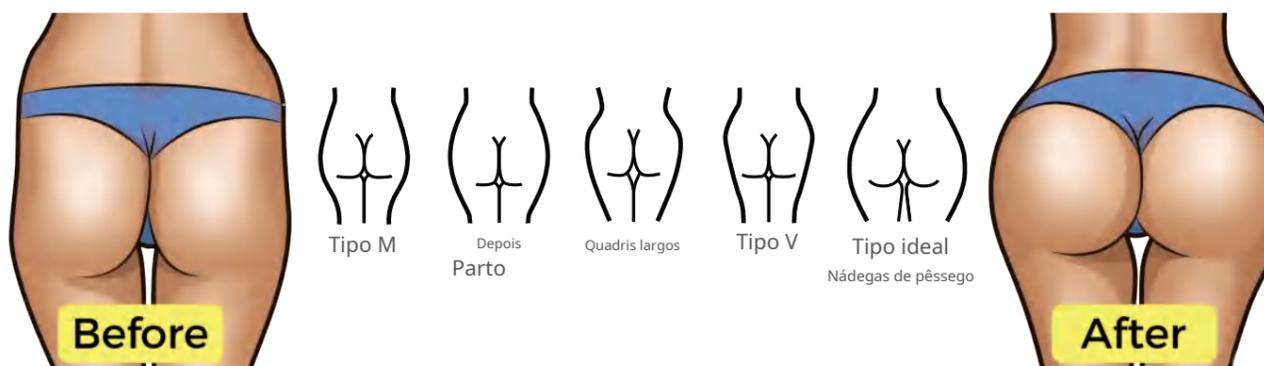

Before

Tipo M Depois Parto Quadril largos Tipo V Tipo ideal Nádegas de pêssego

After

ROLO DE VÁCUO RF INFRAVERMELHO EMAGRECIMENTO MÁQUINA-VSIIIPró

O NBW-VSIII combina quatro tecnologias diferentes, incluindo IR (infravermelho), RF Bi-Polar (radiofrequência), manipulação mecânica de tecido vac, usando vácuo pulsado e rolos de massagem. A combinação das tecnologias IR e v causa um aquecimento profundo no tecido conjuntivo, incluindo os septos fibrosos, que por sua vez promovem a deposição de colágeno e o metabolismo celular local, resultando em uma redução localizada da flacidez da pele e a manipulação mecânica do tecido da Vela aumento imediato na circulação e componentes essenciais da linfa para a estrutura da pele saudável.



-  Cavitação a Vácuo
Peça de mão
-  Rolo infravermelho
Peça de mão
-  Vácuo RF
Peça de mão
-  RF facial
Peça de mão

ESPECIFICAÇÃO	
Número do modelo	VSIII Pro
Potência de RF	800W
Frequência de RF	2Mhz
Potência do laser infravermelho	20w
Comprimento de onda do laser infravermelho	940nm
Potência de ultra-som	200 W
Indensidade do Vácuo	10-90Kpa


PRINCÍPIO DE TRATAMENTO



ESCOPO DO TRATAMENTO


Emagrecer e Modelar

Remove a celulite, reduza a circunferência da cintura, modele a curva corporal perfeita

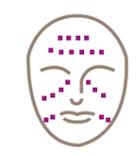


Remoção de rugas

Remove os pés de galinha e melhore a pele ao redor dos olhos

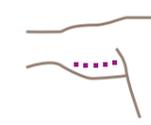


Elevação e aperto

Firmar a pele e aumentar a elasticidade da pele

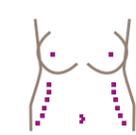

Massagem Relaxante

Acelerar o metabolismo, promover a circulação sanguínea e drenagem linfática

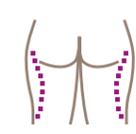

ANTES DEPOIS




MÁQUINA DE LASER PICOSEGUNDA

- PICOFOCO I

O PicoSecond Laser utiliza pulsos ultracurtos (um trilionésimo de segundo em I de pressão, a melanina se fragmenta em minúsculas partículas semelhantes a poeira. Porque o p é prontamente absorvido e eliminado pelo organismo. É um tratamento rápido e fácil para o corpo.



Introdução da peça de mão

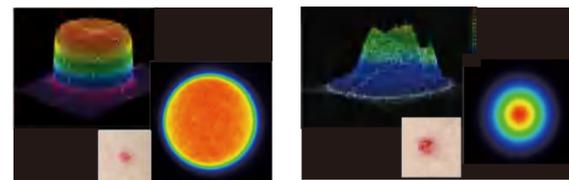

Feixe de cartola

Feixe gaussiano

PARÂMETRO TÉCNICO

Pico de energia	1064nm 1,2GW; 532nm 0,6GW
Comprimento de onda	Padrão 1064nm 532nm 585nm, 650nm, opcional
Energia	Máx. 1.500 mj (1.064); Máx. 300 mj (532)
Frequência	1-10Hz
Tamanho do ponto de zoom	2-10mm Ajustável
Largura do pulso	450ps
Perfil do feixe	Feixe da cartola
Sistema de guiamento de luz	Braço de 7 articulações da Coreia do Sul
Feixe de mira	Diodo 655 nm (Vermelho), Brilho ajustável
Circuito Fechado de Resfriamento	Água para o ar
Tensão	AC220V±10% 50Hz, 110V±10% 60Hz

VANTAGENS

Largura de pulso curta (850ps)

Destruição eficiente do pigmento alvo com dano térmico colateral mínimo atendendo aos critérios de fototermólise seletiva

Feixe da cartola

Garanta que a energia seja fornecida de forma eficiente para maximizar o efeito, minimizando os danos nos tecidos circundantes

Braço Laser Importado

A coreia do sul importou 7 braços articulados comuns, garante a maior perda de energia mínima de saída de energia durante a transmissão a laser

Variedade de comprimentos de onda

1064nm 532nm 585nm 650nm 755nm e peça de mão fracionada, abrangente resolve uma variedade de problemas de pele

ESCOPO DO TRATAMENTO

Remoção de tatuagem

Maquiagem permanente e remoção de tatuagem de todas as cores

Tratamento de Lesões Pigmentadas

Nevo de Ota, marca de nascença, mancha solar, mancha de café, mancha de idade, sarda

Rejuvenescimento da pele

Controle de oleosidade, clareamento da pele, tratamento de poros dilatados, rejuvenescimento da pele a laser de carbono


LASER PICOSEGUNDO VS LASER TRADICIONAL

Resultado mais eficaz e mais rápido:

O laser de picosegundos é 100 vezes mais rápido que a tecnologia tradicional de nanosegundos, como resultado, o sistema de laser de picosegundos quebra as tatuagens mais rapidamente do que os lasers tradicionais. O laser de picosegundos quebrará até mesmo pequenas partículas de tinta, tornando mais fácil para o corpo limpar a tinta da tatuagem.

Risco minimizado e desconforto mínimo:

Os pulsos ultracurtos também otimizam o fornecimento de energia para as partículas de tinta direcionadas, garantindo que a tinta seja tratada de forma eficaz. enquanto a menor quantidade de calor é transferida para a pele, você sentirá um desconforto mínimo durante o procedimento.

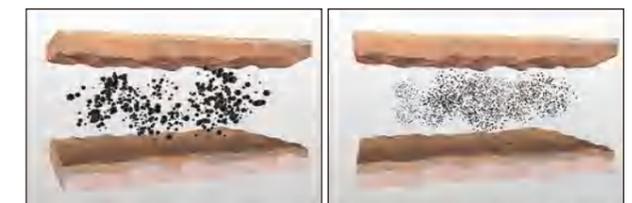

LASER TRADICIONAL

PICOSEGUNDA

ANTES DEPOIS




MÁQUINA DE LASER PICOSEGOND - NBW-PS II

O PicoSecond Laser usa pulsos ultracurtos (um trilionésimo de segundo em length) para atingir a melanina com uma grande pressão e deixar a melanina se quebrar em minúsculas partí culas semelhantes a poeira. Porque as partí culas são tão pequenas, são mais facilmente absorvidos e eliminados pelo organismo. É um tratamento de pele a laser não-cirúrgico e não invasivo rápido e fácil para o corpo.



Introdução da peça de mão

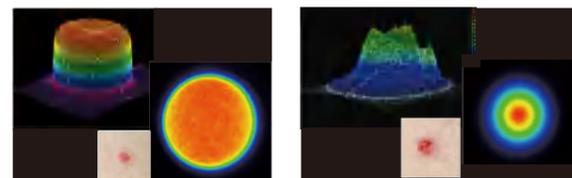

Feixe de cartola

Feixe gaussiano

PARÂMETRO TÉCNICO

Pico de energia	1064nm 1.2GW; 532nm 0.6GW
Comprimento de onda	1064nm 532nm Standard 585nm, 650nm, Optional
Energia	Max 1500mj (1064) ;Max 300mj (532)
Frequência	1-10Hz
Tamanho do ponto de zoom	2-10mm Adjustable
Largura do pulso	450ps
Perfil do feixe	Top Hat Beam
Sistema de guiamento de luz	South Korea 7 Joints Arm
Feixe de mira	Diode 655 nm (Red), Adjustable Brightness
Circuito Fechado de Resfriamento	Water to Air
Tensão	AC220V±10% 50Hz, 110V±10% 60Hz

VANTAGENS

Largura de pulso curta (850ps)

Destruição eficiente do pigmento alvo com dano térmico colateral mínimo atendendo aos critérios de fototermólise seletiva

Feixe da cartola

Garanta que a energia seja fornecida de forma eficiente para maximizar o efeito, minimizando os danos nos tecidos circundantes

Braço Laser Importado

A Coreia do Sul importou 7 braços articulados conjuntos, garante a maior perda de energia mínima de saída de energia durante a transmissão a laser

Variedade de comprimentos de onda

1064nm 532nm 585nm 650nm 755nm e Fractional Handpiece, abrangente resolve uma variedade de problemas de pele

LASER PICOSEGUNDO VS LASER TRADICIONAL

Resultado mais eficaz e mais rápido:

O laser de picossegundos é 100 vezes mais rápido do que a tecnologia tradicional de nano segundos, como resultado, o sistema de laser de picossegundos quebra as tatuagens mais rapidamente do que os lasers tradicionais. O laser de picossegundos quebrará até mesmo pequenas partí culas de tinta, tornando mais fácil para o corpo limpar a tinta da tatuagem.

Risco minimizado e desconforto mínimo:

Os pulsos ultracurtos também otimizam o fornecimento de energia para as partí culas de tinta direcionadas, garantindo que a tinta seja tratada de forma eficaz. enquanto a menor quantidade de calor é transferida para a pele, você sentirá um desconforto mínimo durante o procedimento.

ESCOPO DO TRATAMENTO

Remoção de tatuagem


Maquiagem permanente e remoção de tatuagem de todas as cores

Tratamento de Lesões Pigmentadas

Nevo de Ota, marca de nascença, mancha solar, mancha de café, mancha de idade, sarda

Rejuvenescimento da pele

Controle de oleosidade, clareamento da pele, tratamento de poros dilatados, rejuvenescimento da pele a laser de carbono

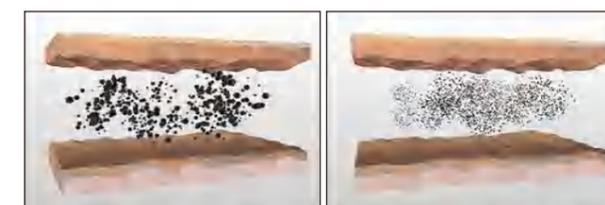

LASER TRADICIONAL

PICOSEGUNDA

ANTES DEPOIS




PICOSECOND LASER MACHINE

- NBW-PS III

The PicoSecond Laser uses ultra-short pulses (one trillionth of a second in length) to hit the melanin with a great pressure and let melanin shatters into tiny dust-like particles. Because the particles are so small, they are more easily absorbed and eliminated by the body. It is a quick and easy non-surgical, non-invasive laser skin treatment for body.



Introdução da peça de mão

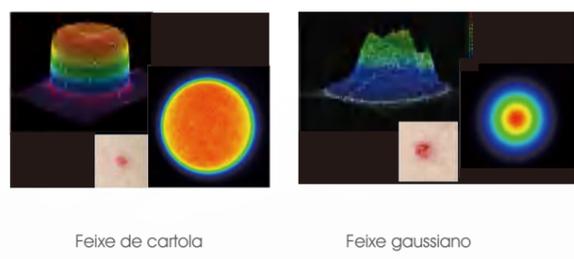

PARÂMETRO TÉCNICO

Pico de energia	1064nm 1.2GW; 532nm 0.6GW
Comprimento de onda	1064nm 532nm Standard 585nm, 650nm, Optional
Energia	Max 1500mj (1064) ;Max 300mj (532)
Frequência	1-10Hz
Tamanho do ponto de zoom	2-10mm Adjustable
Largura do pulso	450ps
Perfil do feixe	Top Hat Beam
Sistema de guiamento de luz	South Korea 7 Joints Arm
Feixe de mira	Diode 655 nm (Red), Adjustable Brightness
Circuito Fechado de Resfriamento	Water to Air
Tensão	AC220V±10% 50Hz, 110V±10% 60Hz

VANTAGENS

Largura de pulso curta (850ps)

Destruição eficiente do pigmento alvo com dano térmico colateral mínimo atendendo aos critérios de fototermólise seletiva

Feixe da cartola

Garante que a energia seja fornecida de forma eficiente para maximizar o efeito, minimizando os danos nos tecidos circundantes

Braço Laser Importado

A Coreia do Sul importou 7 braços articulados conjuntos, garante a maior perda de energia mínima de saída de energia durante a transmissão a laser

Variedade de comprimentos de onda

1064nm 532nm 585nm 650nm 755nm e Fraction-al Handpiece, abrangente resolve uma variedade de problemas de pele

ESCOPO DO TRATAMENTO

Remoção de tatuagem

Maquiagem permanente e remoção de tatuagem de todas as cores

Tratamento de Lesões Pigmentadas

Nevo de Ota, marca de nascença, mancha solar, mancha de café, mancha de idade, sarda

Rejuvenescimento da pele

Controle de oleosidade, clareamento da pele, tratamento de poros dilatados, rejuvenescimento da pele a laser de carbono


LASER PICOSEGUNDO VS LASER TRADICIONAL

Resultado mais eficaz e mais rápido:

O laser de picossegundos é 100 vezes mais rápido do que a tecnologia tradicional de nano segundos, como resultado, o sistema de laser de picossegundos quebra as tatuagens mais rapidamente do que os lasers tradicionais. O laser de picossegundos quebrará até mesmo pequenas partículas de tinta, tornando mais fácil para o corpo limpar a tinta da tatuagem.

Risco minimizado e desconforto mínimo:

Os pulsos ultracurtos também otimizam o fornecimento de energia para as partículas de tinta direcionadas, garantindo que a tinta seja tratada de forma eficaz, enquanto a menor quantidade de calor é transferida para a pele, você sentirá um desconforto mínimo durante o procedimento.

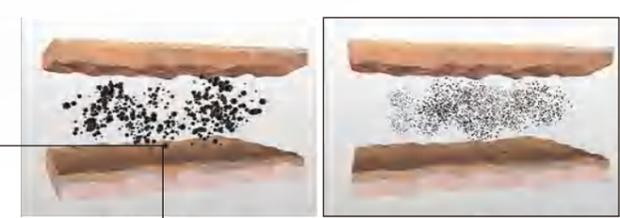


ANTES DEPOIS



ND YAG LASER TATTOO REMOVAL MACHINE- NBW-QL III

The highly selective endogenous melanin of Q-Switched lasers performs as a high-speed shutter. The laser rods store energy in high quantity and emits them efficiently on the most affected areas of the skin. The high-speed pulses have to exit on the affected areas to heal the skin from internally. In nanoseconds are pulses are emitted and the beam stays uniform to avoid any harmful effect.

Introdução da peça de mão

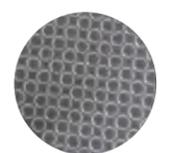

Fractional Lens



1320nm carbon peel lens 1064nm 532nm 755nm fracionado lente (opcional)

PARÂMETRO TÉCNICO

Poder :	800W
Energia:	300-1000mj
Frequência de saída :	1-6Hz
Tamanho da tela :	8 inch
Comprimento de onda :	532nm 1064nm 1320nm
Sistema de refrigeração	Refrigeração a ar + água
Tensão :	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ




REJUVENESCIMENTO DA PELE A LASER DE CARBONO



"Rejuvenescimento da Pele com Laser de Carbono" como tecnicamente o chamamos, é um tratamento a laser adepto não invasivo e indolor que é ótimo para tratar pequenas imperfeições da pele e dar à pele um brilho por dentro. Este laser facial é entregue por uma máquina a laser de última geração que produz pulsos de luz curtos, rápidos e de alta intensidade com capacidade máxima de destruição de detritos entupidos nos poros e nas camadas superiores da pele.

PRINCÍPIOS DE TRATAMENTO

ESCOPO DO TRATAMENTO

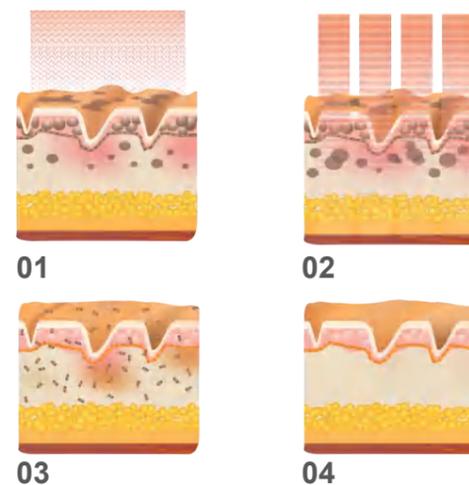

REMOÇÃO DE TATUAGEM

Maquiagem permanente e remoção de tatuagem de todas as cores

Tratamento de Lesões Pigmentadas

Nevo de Ota, marca de nascença, mancha solar, mancha de café, mancha de idade, sarda

Rejuvenescimento da pele

Controle de oleosidade, clareamento da pele, tratamento de poros dilatados, rejuvenescimento da pele a laser de carbono

ANTES DEPOIS




MÁQUINA DE REMOÇÃO DE TATUAGEM A LASER ND YAG - NBW-QLII

A melanina endógena altamente seletiva dos lasers Q-Switched funciona como um obturador de alta velocidade. Os bastões de laser armazenam energia em grande quantidade e emitem-na de forma eficiente nas áreas mais afetadas da pele. Os pulsos de alta velocidade têm que sair nas áreas afetadas para curar a pele internamente. Em nanossegundos são emitidos pulsos e o grão fica uniforme para evitar qualquer efeito prejudicial.



Introdução da peça de mão

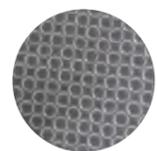

Fractional Lens



1320nm carbon peel lens

1064nm

532nm

755nm fracionado lente (opcional)

PARÂMETRO TÉCNICO


Poder :	800W
Energy :	300-1000mj
Output Frequency :	1-6Hz
Screen size :	8 inch
Wavelength :	532nm 1064nm 1320nm
Cooling System :	Refrigeração a ar + água
Voltage :	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ

REJUVENESCIMENTO DA PELE A LASER DE CARBONO



"Rejuvenescimento da Pele com Laser de Carbono" como tecnicamente o chamamos, é um tratamento a laser adequado não invasivo e indolor que é ótimo para tratar pequenas imperfeições da pele e dar à pele um brilho por dentro. Este laser facial é entregue por uma máquina a laser de última geração que produz pulsos de luz curtos, rápidos e de alta intensidade com capacidade máxima de destruição de detritos entupidos nos poros e nas camadas superiores da pele.

PRINCÍPIOS DE TRATAMENTO

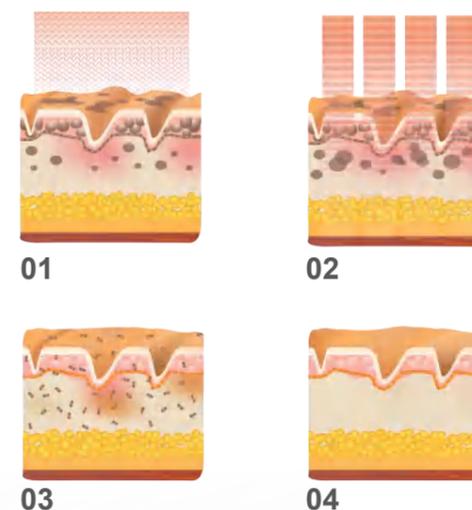

ESCOPO DO TRATAMENTO

REMOÇÃO DE TATUAGEM

Maquiagem permanente e remoção de tatuagem de todas as cores

Tratamento de Lesões Pigmentadas

Nevo de Ota, marca de nascença, mancha solar, mancha de café, mancha de idade, sarda

Rejuvenescimento da pele

Controle de oleosidade, clareamento da pele, tratamento de poros dilatados, rejuvenescimento da pele a laser de carbono

ANTES DEPOIS



IPL SHR ELIGHT 3 IN1 - NBW-ESHR60

Super Hair Removal Technology (SHR) - um novo método revolucionário para depilação permanente que é praticamente livre de dor e efeitos colaterais. Em comparação com outros métodos de laser e IPL ligeiramente datados, o SHR oferece tratamentos de redução de pelos mais rápidos, seguros e sem dor para os clientes.

PEÇAS DE MÃO



SR: 8*40mm

HR: 15*50mm

ESPECIFICAÇÃO

Poder	2000W
Comprimento de onda	SR 560-950nm, HR 640-950nm
modos de trabalho	IPL, SHR, E-light
Energia IPL	10-60j/cm ²
Tamanho do ponto:SR	8*40mm, HR: 15*50mm
SHR energia	3-15j/cm ²
Frequência SHR	1-10Hz
Largura de pulso SHR	1-10ms
potência de RF	160W
energia RF	1-50j
Tamanho da tela	10.4 inches
Tensão	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ

VANTAGENS



2000W de alta potência

A energia de saída é alta o suficiente para garantir que a energia não decaia mesmo no modo de luz rápida, garantindo um bom efeito de tratamento.

Lâmpada de Xenon do Reino Unido

A lâmpada de xenônio do Reino Unido, diâmetro 9MM, alta energia e longa vida útil. Garantia 1 milhão de tiros.


Mais rápido

O método de tratamento em movimento SHR melhorou muito a velocidade do tratamento. A taxa de repetição da máquina SHR é de até 10Hz. A peça de mão pode disparar 10 tiros em 1 segundo.

Sistema de refrigeração forte

Garantir que a superfície da alça esteja sempre fria e o tratamento sempre confortável. Ao mesmo tempo, certificando-se de que a máquina funcione continuamente por 24 horas sem danos pela alta temperatura.

SHR "EM MOVIMENTO" DEPILAÇÃO

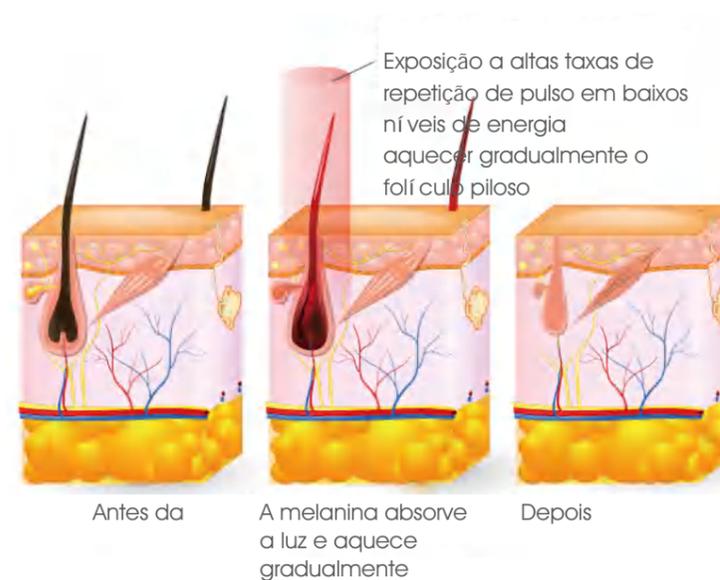

ESCOPO DO TRATAMENTO

Depilação

Remoção permanente de pelos indesejados de todo o corpo e de todas as cores

Rejuvenescimento da pele

Remoção de pigmentação, remoção de rugas, endurecimento da pele, clareamento da pele

Terapia Vascular

Remoção de vasinhos faciais, tratamento de acne, tratamento de vermelhidão facial

ANTES DEPOIS



Máquina laser 3 em 1 IPL SHR RF PICO

- NBW-M3

Pico Laser e Cold RF 3 tecnologias mais populares, todos os problemas de pele podem ser resolvidos com uma máquina.



ESCOPO DO TRATAMENTO

IPL SHR

Depilação; Rejuvenescimento da pele; Remoção de pigmentação, Remoção de rugas, Aperto da pele, Clareamento da pele; Tratamento de acne; Remoção de veias de aranha

Pico Laser

Remoção de Tatuagem; Tratamento de Lesões Pigmentadas; Rejuvenescimento da pele a laser de carbono

Frequência de rádio

Aperto da pele; Remoção de rugas; Lifting Facial; Remoção de Bolsa Ocular

PARÂMETRO TÉCNICO

IPL SHR	
Comprimento de onda	430nm; 480nm; 530nm; 560nm; 640nm; 690nm
Potência de entrada	1800W
Tamanho do ponto	16*50mm
Densidade de Energia	10-60J/cm ²
Nd yag	
Comprimento de onda	1064nm, 532nm, 1320nm
Energia de pulso	100mj (1064nm); 500mj (532nm)
Poder	1000W
Largura do pulso	2000ps
Frequência	1-10Hz
RF	
Frequência de RF	5M
Energia de RF	1-50J/cm ²
Poder	1000W

VANTAGENS



Multifuncional

3 tecnologias mais populares combinadas, uma máquina todas as soluções

6 Filtros

6 filtros SHR diferentes para diferentes escopos de tratamento

RF fria

Tecnologia RF fria, tratamento confortável com alta energia. Garantindo o melhor resultado do tratamento

Peça de mão picolaser

Peça de mão Picolaser, mais nova tecnologia com menor risco e melhor resultado

Estrutura das peças de mão



Alça IPL SHR:
6 filtros diferentes




Alça de RF frio: Peça de mão



Peça de mão Picolaser 3 pontas de prova

ANTES DEPOIS

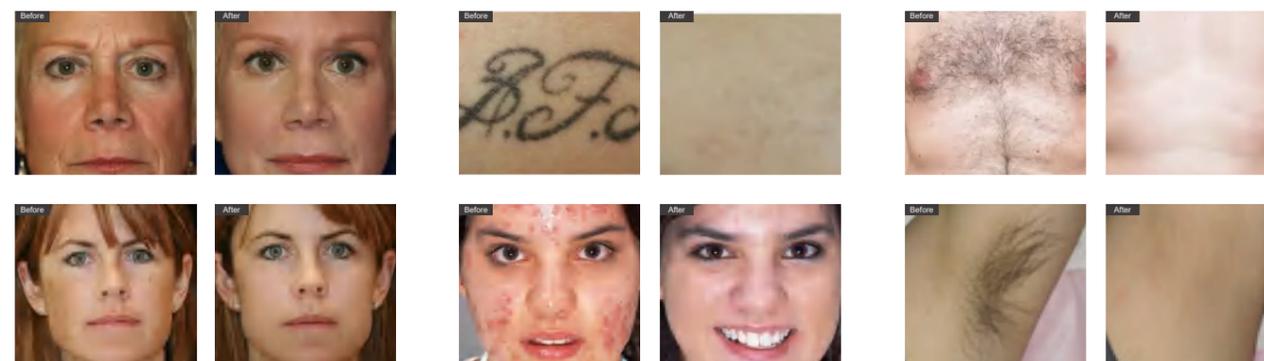

LASER CO2 FRACIONADO - FEMTO-

DERMA II

O laser de CO2 fracionado Ultrapulse emite milhares de pequenas colunas de pontos focais profundos em sua pele, chamadas de zonas de tratamento microscópicas. Essas luzes penetram na derme da pele, gaseificam os tecidos ao redor de rugas e cicatrizes em um instante e fazem um sinal de composição de colágeno como reparo de tecidos, rearranjo de colágeno etc. para recuperar uma nova pele fresca e saudável da juventude.



Treatment heads for 3 systems: Normal, Fractional and Gynecology



7 gráficos de tratamento variável, formas, tamanhos e espaçamento ajustáveis



O dispositivo laser coerente importado dos EUA garante uma saída de laser constante e uniforme



Braço guiador de luz articulado de 7 articulações. Conveniente e flexível em operação, reduzindo significativamente a perda de energia.

ESPECIFICAÇÃO

O tipo de laser	10600nm Carbon dioxide laser
Modo de trabalho	Fractional; Normal; Viginal(optional)
Potência de entrada	1000 w
Potência do Laser	1~40W(1W step)
Largura do pulso	0.1~10ms(0.1ms step)
Repetir o tempo	1~20 times (1 step)
Distância do ponto	0.1mm(100% coverage rate)~2.6mm (1% coverage rate) (0.1mm step)
Digitalizar Forma	Square; Rectangle; Circle; Triangle;
Padrões de digitalização	Rhombus; Ellipse; Line
Exibição	Standard; Random; Scatter
Tensão de entrada	AC 220V 50Hz ;AC 110V 60Hz

TRATAMENTO VAGINAL

Use uma sonda de braço articulado com tecnologia de brotação automática 360, produzindo em 50-70°C a uma profundidade controlada dentro da mucosa vaginal estimula a contração, reestruturação e regeneração do colágeno; promove a proliferação e remodelação das fibras de colágeno; melhora a microcirculação da mucosa vaginal; aumenta a secreção celular e a função de reação dinâmica; corrige o valor do PH do interior vaginal; melhora o ambiente interno; atinge partes íntimas femininas para firmar, nutrir e restaurar uma vida sexual harmoniosa e duradoura significativa.



PROCESSO DE TRATAMENTO

1 antes do tratamento



2 durante o tratamento



3 depois de um minuto



4 após 30 dias



ESCOPO DO TRATAMENTO

Rejuvenescimento da pele

Renovação e recapeamento da pele – remoção de rugas, endurecimento da pele

Remoção de Cicatrizes

Cicatrizes lisas como queimaduras, cirurgias, traumáticas, cicatrizes de acne e estrias

Tratamento de Pigmentação

Remove manchas de cloasma, manchas intratáveis, sardas de manchas solares e outras pigmentação

Tratamento Vaginal

Aperto vaginal, clareamento vaginal, Tratamento da secura vaginal

ANTES DEPOIS



LASER CO2 FRACIONADO-FEMTO-DERMA III

O laser de co2 fracionado Ultrapulse emite milhares de pequenas colunas de pontos focais profundos em sua pele, chamadas de zonas de tratamento microscópicas. Essas luzes penetram na derme da pele, gaseificam os tecidos ao redor de rugas e cicatrizes em um instante e fazem um sinal de composição de colágeno como reparo de tecidos, rearranjo de colágeno etc. para recuperar uma nova pele fresca e saudável da juventude.



cabeças de tratamento para 3 sistemas: Normal, Fracionado e Ginecologia



7 gráficos de tratamento variável, formas, tamanhos e espaçamento ajustáveis



O dispositivo laser coerente importado dos EUA garante uma saída de laser constante e uniforme



Braço guia de luz conveniente, reduzindo muito a energia

ESPECIFICAÇÃO

O tipo de laser	Laser de dióxido de carbono de 10600nm
Modo de trabalho	Fracionado;Normal;Virginal(opcional)
Potência de entrada	1000 w
Potência do Laser	1~40W (passo de 1W)
Largura do pulso	0,1~10ms (passo de 0,1ms)
Repetir o tempo	1~20 vezes (1 passo)
Distância do ponto	0,1 mm (taxa de cobertura de 100%) ~ 2,6 mm (taxa de cobertura de 1%) (passo de 0,1 mm)
Digitalizar Forma	Quadrado; Retângulo; Círculo; Triângulo; Losango; Elipse; Linha
Padrões de digitalização	Padrão; Aleatório; Dispersão
Exibição	Tela sensível ao toque LCD de 10,4" True Color
Tensão de entrada	CA 220V 50Hz; CA 110V 60Hz

TRATAMENTO VAGINAL

Use uma sonda de braço articulado com automaticamente 360. tecnologia de rotação, produzindo em 50-70°C a uma profundidade controlada dentro da mucosa vaginal estimula a contração, reestruturação e regeneração do colágeno; promove a proliferação e remodelação das fibras de colágeno; melhora a microcirculação da mucosa vaginal; aumenta a secreção celular e a função de reação dinâmica; corrige o valor do PH do interior vaginal; melhora o ambiente interno; atinge partes íntimas femininas para firmar, nutrir e restaurar uma vida sexual harmoniosa e duradoura significativa.



PROCESSO DE TRATAMENTO

1 antes do tratamento



2 durante o tratamento



3 após um minuto



4 após 30 dias




ESCOPO DO TRATAMENTO

remoção de pele, pele

matic, cicatriz de acne

nt
e mancha, mancha de sol

g, Tratamento de

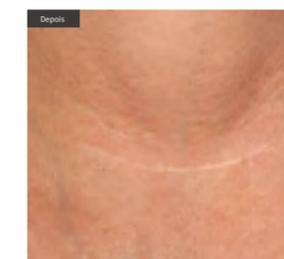

MÁQUINA DE TIGANTE DE PELE 5D HIFU

- SMASFOCUS III MINI

5D HIFU (Ultrassom Focado de Alta Intensidade) é uma tecnologia não cirúrgica que oferece lifting de sobrancelha, lifting de papada, redução de dobra nasolabial, redução de rugas periorbitais e aperto e rejuvenescimento geral da pele. A energia acústica altamente focada cria zonas de coagulação térmica em 3 profundidades diferentes. A resposta de cicatrização de feridas resulta na formação de novo colágeno, proporcionando assim um endurecimento da pele a longo prazo. Não há tempo de inatividade associado a este procedimento não invasivo. O HIFU rapidamente se tornou um dos tratamentos de lifting facial não cirúrgicos mais procurados com a necessidade de apenas uma sessão e resultados que podem durar até 18 meses

PEÇAS DE MÃO



Punho vaginal

3,0 mm, 4,5 mm

ESPECIFICAÇÃO

Poder	1200 W
Frequência	4MHz-7MHz
Largura	1- 10 mm Ajustável
Comprimento	5 - 25 mm Ajustável
Saída de energia	Saída de energia 0,2 - 2J/cm2
Tiro de cartucho	20.000 linhas
Cartuchos	1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 8,0 mm (Padrão) 6,0 mm, 10,0 mm, 13,0 mm, 16,0 mm (opcional)

Sobrancelha, rugas ao redor dos olhos,
Rugas ao redor do mês

Cheque, testa, queixo duplo,
Rugas do pescoço, formação de linha em V

Cheque, testa, queixo duplo,
Rugas do pescoço, formação de linha em V

Abdômen, Parte interna das coxas, Parte externa das coxas,
Quadril e nádegas, Parte interna dos braços, Peito

Emagrecimento corporal e redução de gordura

Aperto vaginal



Os transdutores alimentados por HIFU fornecem ondas concentradas de ultra-som em várias camadas de pele e tecidos do corpo sem fazer contato direto com as áreas circundantes.

Transferindo temperaturas estabilizadas de 65 ~ 75 ° C para as zonas alvo, o smasfocus V visa induzir um processo de neocolagênese no rosto enquanto aperta os tecidos do corpo para fins de contorno

ANTES DEPOIS



MÁQUINA DE TIGANTE DE PELE 5D HIFU

- SMASFOCUS III

5D HIFU (Ultrassom Focado de Alta Intensidade) é uma tecnologia não cirúrgica que oferece lifting de sobrancelha, lifting de papada, redução de dobra nasolabial, redução de rugas periorbitais e aperto e rejuvenescimento geral da pele. A energia acústica altamente focada cria zonas de coagulação térmica em 3 profundidades diferentes. A resposta de cicatrização de feridas resulta na formação de novo colágeno, proporcionando assim um endurecimento da pele a longo prazo. Não há tempo de inatividade associado a este procedimento não invasivo. O HIFU rapidamente se tornou um dos tratamentos de lifting facial não cirúrgicos mais procurados com a necessidade de apenas uma sessão e resultados que podem durar até 18 meses



PEÇAS DE MÃO



Punho vaginal

3,0 mm, 4,5 mm

ESPECIFICAÇÃO

Poder	1200 W
Frequência	4MHz-7MHz
Largura	1- 10 mm Ajustável
Comprimento	5 - 25 mm Ajustável
Saída de energia	Saída de energia 0,2 - 2J/cm2
Tiro de cartucho	20.000 linhas
Cartuchos	1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 8,0 mm (Padrão) 6,0 mm, 10,0 mm, 13,0 mm, 16,0 mm (opcional)

Sobrancelha, rugas ao redor dos olhos,
Rugas ao redor do mês

Cheque, testa, queixo duplo,
Rugas do pescoço, formação de linha em V

Cheque, testa, queixo duplo,
Rugas do pescoço, formação de linha em V

Abdômen, Parte interna das coxas, Parte externa das coxas,
Quadrís e nádegas, Parte interna dos braços, Peito

Emagrecimento corporal e redução de gordura


Aperto vaginal



Os transdutores alimentados por HIFU fornecem ondas concentradas de ultra-som em várias camadas de pele e tecidos do corpo sem fazer contato direto com as áreas circundantes.

Transferindo temperaturas estabilizadas de 65 ~ 75 ° C para as zonas alvo, o smasfocus V visa induzir um processo de neocolagênese no rosto enquanto aperta os tecidos do corpo para fins de contorno

ANTES DEPOIS

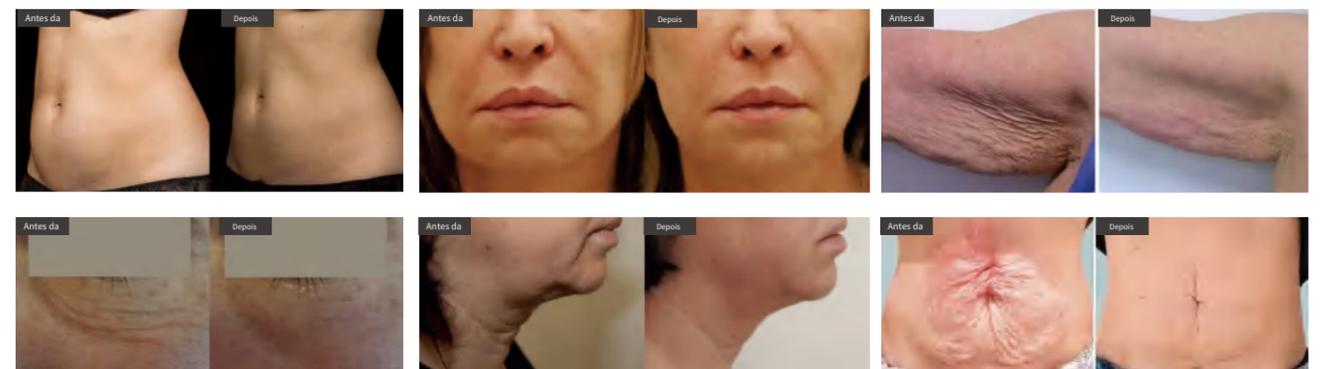

MICROAGULHAMENTO DE RF FRACIONADO

- NBW-FR300

Fractional RF é um aparelho de beleza que combina os efeitos perfeitos da Radio Wave com uma terapia. A combinação desses dois métodos em um tratamento potencializa a remoção das marcas, e garante a melhoria rápida da textura. O dispositivo permite o uso de dois métodos diferentes de funcionamento das ondas de rádio.



PEÇAS DE MÃO



PARÂMETRO TÉCNICO

Frequência de RF	5 MHz
Intensidade de energia de RF	1~10 nível
Poder	80W
Tipo de agulhas	81 dicas, 49 dicas, 25 dicas
Profundidade da Agulha	0,3-3mm (ajustável)
Área da cabeça MRF (cm ²)	1*1, 1,5*1,5, 2*2
Área da cabeça SRF	36 pinos / 2*2 cm ²
Tensão de entrada	110/220V; 50/60Hz

PRINCÍPIO DE TRATAMENTO



Profundidade da Agulha Ajustável

A agulha é ajustável de 0,3 ~ 3 mm, opera a camada da epiderme e a camada da derme controlando a profundidade da agulha na unidade de 0,1 mm


Sistema de disparo de agulhas

O controle automático de saída pode tornar a energia de RF melhor distribuída na derme, para que os pacientes possam obter melhores resultados de tratamento.

Dois métodos de tratamento

Existem duas formas de tratamento com ponta Dual Matrix e ponta RF Microneedle para atender às necessidades de diferentes clientes.


PRINCÍPIO DE TRATAMENTO

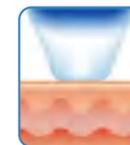

A RF fracionada superficial possui dois canais exclusivos que se combinam para fornecer ablação epidérmica e coagulação dérmica.



O primeiro canal oferece uma zona mais profunda de efeito térmico controlado para ativar o colágeno e melhorar a firmeza da pele.

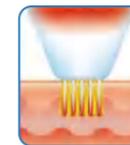

O segundo canal fornece microablação das camadas superiores da epiderme e coagulação leve para ablação fracionada controlada e rejuvenescimento da pele com aplicação de RF minimamente invasiva.



Juntos, os dois canais fornecem uma zona de tratamento tridimensional para rejuvenescimento da pele superior, firmeza geral e resultados consistentes com os quais você pode contar.

ESCOPO DO TRATAMENTO



FACIAL

- Lifting facial e ocular
- Aperto da pele
- Redução de rugas
- Rejuvenescimento da pele
- Redução de Poros Alargados
- Tratamento de cicatrizes de acne

CORPO

- Tratamento de Estrias
- Remoção de cicatrizes
- Queratose pilar
- Tratamento da Hiperidrose

ANTES DEPOIS

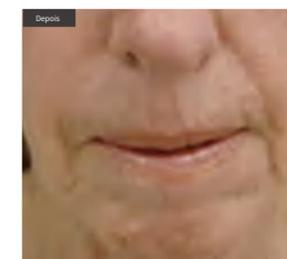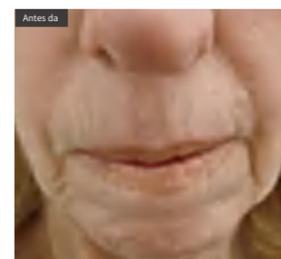


MICROAGULHAMENTO DE RF FRAZIONADO

- NBW-MICRODERMA II

Fractional RF é um aparelho de beleza que combina os efeitos perfeitos da Radio Wave com uma terapia. A combinação desses dois métodos em um tratamento potencializa a remoção das marcas, e garante a melhoria rápida da textura. O dispositivo permite o uso de dois métodos diferentes de funcionamento das ondas de rádio.




PEÇAS DE MÃO

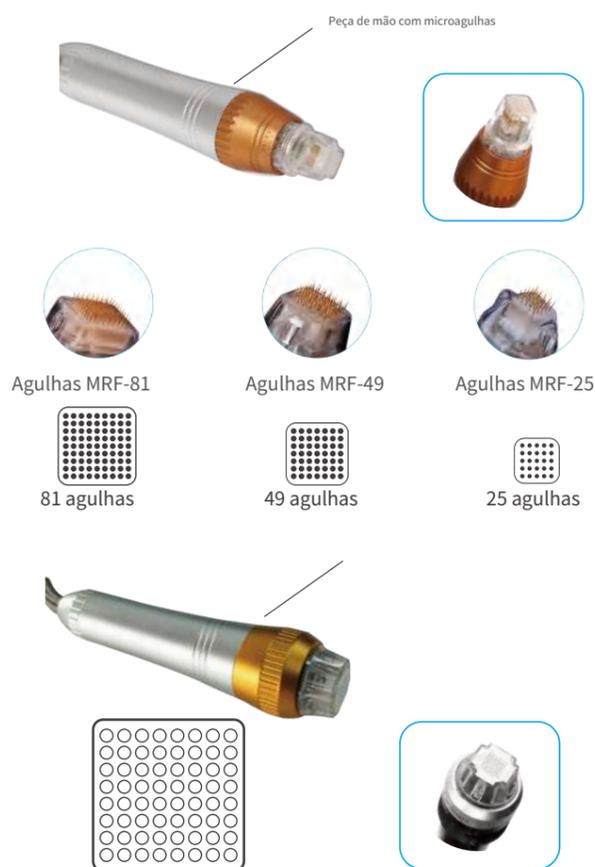

PARÂMETRO TÉCNICO

Frequência de RF	5 MHz
Intensidade de energia de RF	1~10 nível
Poder	80W
Tipo de agulhas	81 dicas, 49 dicas, 25 dicas
Profundidade da Agulha	0,3-3mm (ajustável)
Área da cabeça MRF (cm ²)	1*1, 1,5*1,5, 2*2
Área da cabeça SRF	64 pinos / 2*2 cm ²
Tensão de entrada	110/220V; 50/60Hz

PRINCÍPIO DE TRATAMENTO

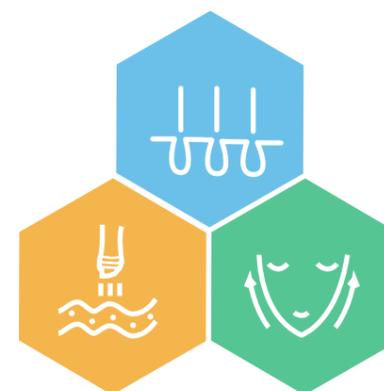

Profundidade da Agulha Ajustável

A agulha é ajustável de 0,3 ~ 3 mm, opera a camada da epiderme e a camada da derme controlando a profundidade da agulha na unidade de 0,1 mm

Sistema de disparo de agulhas

O controle automático de saída pode tornar a energia de RF melhor distribuída na derme, para que os pacientes possam obter melhores resultados de tratamento.


Dois métodos de tratamento

Existem duas formas de tratamento com ponta Dual Matrix e ponta RF Microneedle para atender às necessidades de diferentes clientes.


PRINCÍPIO DE TRATAMENTO




A RF fracionada superficial possui dois canais exclusivos que se combinam para fornecer ablação epidérmica e coagulação dérmica.

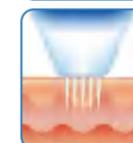

O primeiro canal oferece uma zona mais profunda de efeito térmico controlado para ativar o colágeno e melhorar a firmeza da pele.

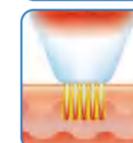

O segundo canal fornece microablação das camadas superiores da epiderme e coagulação leve para ablação fracionada controlada e rejuvenescimento da pele com aplicação de RF minimamente invasiva.

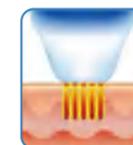

Juntos, os dois canais fornecem uma zona de tratamento tridimensional para rejuvenescimento da pele superior, firmeza geral e resultados consistentes com os quais você pode contar.

ESCOPO DO TRATAMENTO



FACIAL

- Lifting facial e ocular
- Aperto da pele
- Redução de rugas
- Rejuvenescimento da pele
- Redução de Poros Alargados
- Tratamento de cicatrizes de acne

CORPO

- Tratamento de Estrias
- Remoção de cicatrizes
- Queratose pilar
- Tratamento da Hiperidrose

ANTES DEPOIS

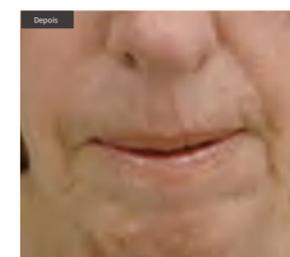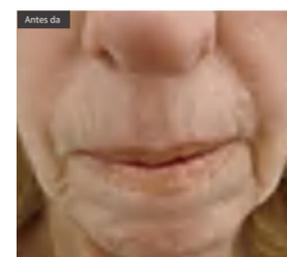

PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL DE CUIDADOS COM A PELE 8 EM 1

- HI-SKIN I

Hidroxi solúvel é a purificação de água purificada em água de hidrogênio e oxigenação, a superfície da pele pode produzir moléculas de H₂, para que a molécula de água possa penetrar rapidamente na derme. de modo a alcançar o efeito de rejuvenescimento e clareamento da pele.




Estrutura das peças de mão

- Punho de Hidrodermoabrasão Hidrogênio Oxigênio
- Cabo frio de RF e martelo frio
- Punho de Pulverização Atomizador de Polímero
- Cabo de RF bipolar
- Ultrassom Apresentando Nandle
- Sonda de Detecção de Pele HD
- Punho de limpeza de pele com vibração ultra-sônica

ESPECIFICAÇÃO

Poder	600w
Frequência de RF	3MHz
Tela	Tela sensível ao toque de 10,4 polegadas
Pixel	20 milhões
Sonda de dermoabrasão	10 fotos
Vácuo	0-90Kpa
Capacidade de fluxo	30 L Máx.
Tensão	100V-240V 50Hz-60Hz

VANTAGENS

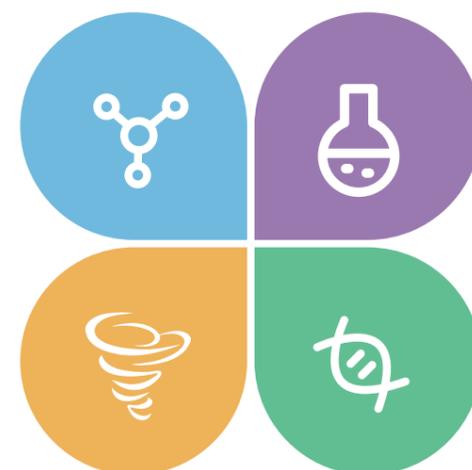

Alta eficiência

Uma máquina, solução para todos os problemas de pele

O mais novo

A mais nova tecnologia Hydrogen Oxgen, limpa mais profundamente

Inteligente


Tela sensível ao toque de 7 polegadas, software inteligente de fácil operação

Multifuncional

6 peças de mão atendem à demanda de diferentes clientes

PRINCÍPIO DE TRATAMENTOS

Máquina de Dermoabrasão Hydra combinando poderosa esfoliação, limpeza, hidratação e rejuvenescimento da pele que deixam a pele hidratada, com aspecto mais brilhante, suave e rejuvenescido. Imediatamente após o tratamento, a pele fica suave e refrescada com aumento do fluxo sanguíneo para a superfície.

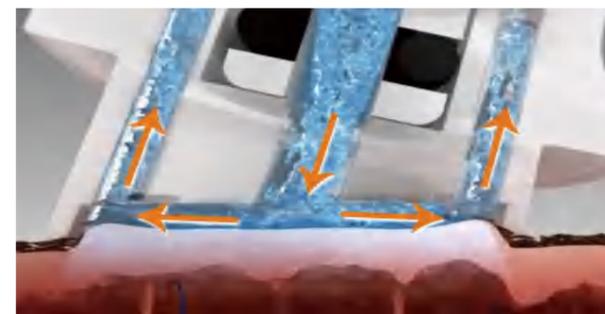

ESCOPO DO TRATAMENTO

Limpeza profunda

Remove cravos, ácaros, remove o pó de graxa, Remover Pele Morta

Aperto da pele

Lifting facial, lifting de olhos, remoção de rugas

Rejuvenescimento da pele

Hidratação da pele, redução de poros, injeção de essência, clareamento da pele, Tratamento de acne

ESCOPO DO TRATAMENTO



Poros dilatados

Rugas

Óleo e Acne

Pele seca

Cutin pele morta

pele pálida